

实验室及工业行业 仪器设备专业供应商
优越品质 一流服务 中国智造



苏州三清仪器有限公司
SUZHOU SOODKING INSTRUMENT CO., LTD.

公司简介



苏州三清仪器有限公司专业从事环境试验、环境测试、安全防护等相关领域的产品的研发、方案设计及销售。致力为广大客户提供优质可靠的产品服务及最佳的设计方案，努力成为实验室及工业仪器设备行业领先的专业供应商。

公司主营产品：真空干燥箱，鼓风干燥箱，培养箱，试验箱，电子防潮箱，氮气柜，工业防爆安全柜，强酸强碱柜，毒害品存储柜及储物更衣柜等产品。产品广泛应用于：电子，化工，制药，机械加工，高校实验室，医疗机构，食品行业及科研单位等各个不同的领域，赢得了行业内的广泛认同及推荐使用。

优质的产品品质和完善的服务系统

三清仪器为客户提供的一款产品，都经过严格的检测及测试，取得相关检测机构的产品质量证书，并在各领域内已得到广泛使用。三清仪器经多年努力，加上客户的支持，已经在客户中享有较高的声誉并赢得较强的信任。

三清仪器一直秉承“科技创新、品质服务”的企业宗旨，为客户提供售前到售后的全方位服务。三清仪器为每位客户提供专业的售前技术咨询、以及售后的人员培训。同时建立起清晰详细的客户档案体系、以便快速准确的为客户服务。具备专业维修素质的服务队伍，建立起专业的售后服务中心，要求做到积极、责任、坦诚，为我公司售出的产品提供全面周到的服务，令客户满意。

►企业风采



产品目录

环境测试实验设备

真空干燥箱 真空脱泡箱	P1
鼓风干燥箱 烘箱 烤箱	P3
高温干燥箱 400°C / 500°C	P5
订制类行业专用干燥箱	P6
千级 / 万级无尘氮气烘箱	P7
百级洁净烘箱	P8
高低温(交变)试验箱 试验机	P9
高低温(交变)湿热试验箱	P10
恒温恒湿试验箱	P11
培养箱(生化/霉菌/恒温恒湿)	P12

安全防护存储设备

电子防潮箱 电子防潮柜	P13
智能氮气柜 节约氮气柜	P14
工业安全柜 防爆安全柜	P15
易制毒化学品存储柜	P17
强酸强碱柜 PP柜	P18

三清仪器物联网管理系统

温湿度记录管理系统	P19
储物柜更衣柜及物联网管理系统	P20



欧盟CE认证



RoHS认证



防爆测试报告



耐火测试报告



营业执照



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT

真空干燥箱 真空脱泡箱

真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化的物质而设计的，工作时可使真空干燥箱工作室保持一定的真空度，且可以向真空干燥箱箱体内充入相关的惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。真空干燥箱采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，做粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。



产品特点

- ◆ 外壳采用1.2mm优质冷轧钢板加强设计而成，表面静电喷塑而成，防腐蚀，耐刮擦。
- ◆ 工作室采用3.0mm优质不锈钢板加强设计制成，角落圆弧设计，确保产品经久耐用。
- ◆ 门窗安装钢化、防弹双层玻璃，观察工作室内物体一目了然，箱门闭合松紧可调节。
- ◆ 整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空气度。寿命长，长时间高温工作不易老化。
- ◆ 不锈钢加热器，保证箱内良好的温度均匀性，采用加厚硅酸保温棉，保温性能良好。
- ◆ 微电脑智能控温仪，超高亮高清LED显示，数据精准。设定，实时温度双数字显示。
- ◆ PID自整定功能，具有温控，定时（1~9999min），报警，设定参数可记忆等功能。
- ◆ 选装真空气度自动控制系统，实时监控箱内的真空气度，使真空气度固定在一个设置值内。
- ◆ 选装真空气度分段编程控制器，通过屏幕控制干燥箱多段不同的真空气度下的运行时间。

备注：

1. 真空干燥箱切记要先抽取真空，当真空气度抽取完成后在加热真空干燥箱。
2. DZF-6020 DZF-6030 DZF-6050 DZF-6250 为台式真空干燥箱 卧式左右结构。
3. DZF-6090 DZF-6210 DZF-6500 为立式真空干燥箱 立式上下结构。
4. 可根据客户的需求订制真空干燥箱，包括温度要求（如400°C），尺寸要求等。
5. 立式真空干燥箱下箱体可放置真空气泵，真空气泵无外露，视觉美观。台式需另放真空气泵。

三清仪器真空干燥箱配置的真空气泵为直联旋片式真空气泵，使用寿命长，噪音小，发热量低等优点。

真空气泵默认工作200小时后需要更换真空气泵的油量，具体以真空气泵的油量观察窗的油色为准

产品型号	工作室尺寸 (MM)	外形尺寸 (MM)	功率 (W)	真空气度	电源电压	温控参数	隔板	
DZF-6020	W300*D300*H275	W585*D450*H455	500	<133Pa	220V 50HZ	温度范围：室温 ~ 250°C 温度分辨率：0.1°C 温度波动度：≤±0.5°C	1	
DZF-6030	W320*D320*H300	W605*D470*H480	800				1	
DZF-6050	W415*D370*H345	W700*D520*H525	1400		380V 50HZ		2	
DZF-6090	W450*D450*H450	W595*D600*H1245	2400				2	
DZF-6210	W560*D640*H600	W705*D790*H1395	3600				3	
DZF-6250	W700*D600*H600	W1030*D750*H890	4000				3	
DZF-6500	W630*D810*H845	W790*D1030*H1850	8000				3	

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

真空干燥箱 真空脱泡箱
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

ENTERPRISE PRODUCT

真空度自动控制介绍



真空干燥箱采用模拟工程学的数字技术控制真空度，通过电磁阀全自动数显控制仪控制真空度，为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板设置，真空度从0pa至105pa可调，可调精度为1pa。传感器采用电阻硅管压力传感器，从而保证了稳定的压力值，不受气流的影响，把稳定的压力值传给真空控制仪LED显示屏上。配合相应大功率的真空泵，真空箱内最低真空度可以达到10pa以下军工级别。

真空度分段编程介绍



产品特点

真空度分段编程曲线程序通过进口控制模块，实现真空干燥箱在不同的真空度下分段运行，真空度精确，稳定性能良好。搭配性能稳定的真空泵，噪音小，发热低，低振动，可让真空干燥箱稳定运行。用户可设置真空度 P1，运行时间 T1；真空度 P2，运行时间 T2...真空度 PN，运行时间为 TN。当真空干燥箱在真空度 P1 条件下，运行时间达到 T1，自动转换为真空度 P2，运行时间为 T2.....

真空干燥箱相比鼓风干燥箱的优势：真空干燥箱的真空环境降低了液体的沸点，不仅可以应用于热敏性物质，还可以有效缩短干燥时间。对于构造复杂的样品清洗后使用真空干燥箱，干燥会更加彻底。在真空或充入惰性气体的环境下，可避免氧化物遇热爆炸的可能。



真空表和温控仪



立式干燥箱 真空泵为内置



台式干燥箱 真空泵为外置

真空干燥箱选配件

- 1 真空度自动控制系统，防止真空度变化给物料带来负面影响。
- 2 真空度多段程序控制器，满足用户不同的需求。
- 3 无纸记录仪，微型打印机。
- 4 惰性气体进气阀，充入惰性气体，保护物料。
- 5 过滤器，防止细小颗粒进入真空泵而损坏真空泵。
- 6 真空机组，真空度4-10pa, 用来极限真空试验。



E NTERPRISE PRODUCT

鼓风干燥箱 烘箱 烤箱

鼓风干燥箱是通过风机吹出热风，保证箱内温度平衡，又称恒温干燥箱。主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。恒温鼓风干燥箱应用于化工，电子，铸造，汽车，食品，机械等各个行业在恒温环境条件下做干燥处理和各种恒温适应性试验。

产品特点



- ◆ 外壳采用1.2mm优质冷轧钢板加强制造，牢固耐用。表面静电喷塑，耐腐蚀，耐刮擦。
- ◆ 内胆采用优质SUS304不锈钢材料加强设计制成，柜体牢固，经久耐用，隔板承重性高。
- ◆ 半圆形四角设计使风向流畅及清洁更方便。合理的风道设计使得箱内温度均匀性良好。
- ◆ 工作室与外箱之间使用优质超细玻璃纤维保温棉，隔温效果好，减少内腔热量的外传。
- ◆ 温控系统采用微电脑技术，该系统具有控温、定时和超温报警等功能。控温效果极佳。
- ◆ 双屏超高亮视窗数字显示，示值清晰、直观。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。
- ◆ 智能控制，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态。超温报警并自动切断加热电源。
- ◆ 加热系统采用盘状不锈钢电加热管，热传导面积大，升温快，不易氧化衰减且寿命长。
- ◆ 采用纳米材料门封条及隔热保温材料。高温下不易老化，寿命长，保温隔热效果更佳。
- ◆ 工作室内的搁架，可任意调节高度及数量，配置大视角玻璃观察窗，方便用户查看情况。

备注

- 1.台式鼓风干燥箱为卧式左右结构。立式鼓风干燥箱为上下立式结构。
- 2.型号尾数A表示温度为250°C，尾数B表示温度为300°C，结构尺寸完全一样。
- 3.三清仪器鼓风干燥箱装配有漏电，短路，超温，过热，过流等安全保护系统。

台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250°C 型号尾数B表示300°C						
产品型号	工作室尺寸(MM)	外形尺寸(MM)	消耗功率(W)	电源电压	温控参数	隔板
DHG-9023A / DHG-9023B	W300*D300*H270	W585*D480*H450	500 / 1050	220V 50HZ	分辨率：0.1°C 波动度：≤±0.5°C 均匀度：≤±2°C	2
DHG-9030A / DHG-9030B	W340*D325*H325	W625*D510*H505	750 / 1050			2
DHG-9053A / DHG-9053B	W420*D350*H350	W705*D530*H530	750 / 1050			2
DHG-9070A / DHG-9070B	W450*D400*H450	W735*D585*H630	1050 / 1500			2
DHG-9123A / DHG-9123B	W550*D350*H550	W835*D530*H730	1500 / 1740			2
DHG-9140A / DHG-9140B	W550*D450*H550	W835*D635*H730	1500 / 2000			2
DHG-9203A / DHG-9203B	W600*D550*H600	W885*D730*H780	2000 / 2100			2
DHG-9240A / DHG-9240B	W600*D500*H750	W885*D685*H930	2100 / 2500			2
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250°C 型号尾数B表示300°C						
DHG-9030A / DHG-9030B	W340*D320*H320	W495*D500*H625	750 / 1050	220V 50HZ	分辨率：0.1°C 波动度：≤±0.5°C 均匀度：≤±2°C	2
DHG-9070A / DHG-9070B	W400*D350*H500	W545*D530*H805	1050 / 1500			2
DHG-9140A / DHG-9140B	W450*D550*H550	W595*D730*H855	1500 / 2000			2
DHG-9240A / DHG-9240B	W500*D600*H750	W645*D780*H1055	2100 / 2500			2
DHG-9420A / DHG-9420B	W600*D550*H1300	W745*D730*H1670	4000 / 4500			4
DHG-9620A / DHG-9620B	W800*D600*H1300	W945*D780*H1670	4500 / 6000	380V 50HZ	分辨率：0.1°C 波动度：≤±0.5°C 均匀度：≤±2°C	4
DHG-9640A / DHG-9640B	W800*D800*H1000	W945*D1000*H1370	4500 / 6000			3
DHG-9920A / DHG-9920B	W1000*D600*H1600	W1145*D780*H1970	6000 / 7500			4
DHG-1000A / DHG-1000B	W1000*D1000*H1000	W1145*D1440*H1380	6500 / 8000			4

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

鼓风干燥箱 烘箱 烤箱
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

ENTERPRISE PRODUCT

鼓风干燥箱多段程序温控系统

鼓风干燥箱多段温度程序控制系统采用进口控制模块，实现鼓风干燥箱在不同的温度下分段运行，温度控制精确，稳定性良好。搭配性能稳定的不锈钢加热管和设有合理风道的不锈钢工作室，可让鼓风干燥箱稳定运行，温度均匀性良好和温度波动性小等特点。用户可设置温度W1，运行时间T1；温度W2，运行时间T2……温度WN，运行时间TN。当鼓风干燥箱在温度W1条件下，运行时间达到T1，自动转换为温度W2，运行时长为T2……。



三清仪器鼓风干燥箱安全保护系统



充氮烘箱 充氮干燥箱

鼓风干燥箱加装充氮接口及氮气流量计，配有氮气管道快速接头，方便用户接入氮气及控制氮气的流量。

三清仪器充氮干燥箱工作室满焊打磨并涂抹高温胶，以确保良好的气密性而大大节约氮气消耗量。充氮干燥箱进风口被封闭但可调节，只有氮气进入做为进风。采用高性能电机和风扇，工作室氮气可循环更新，搭配合理的风道和循环系统使工作室内氮气分布和温度更加均匀。

鼓风干燥箱选配件

- 1 多段程序温控系统，满足用户多功能要求
2 独立限温控制器，超温即自动停止加热

- 3 无纸记录仪 微型打印机 充氮接口及流量计
4 温度测试孔，便于实验操作和测量温度



扫一扫
查找更多

E NTERPRISE PRODUCT

高温干燥箱 400°C / 500°C

高温烘箱内胆采用优质不锈钢加工成型，具有微电脑智能控温仪，PID模糊逻辑程序控制，超温报警功能等。适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下干燥和恒温适应性实验，以及热老化、高温老化等物料老化试验。



产品特点

- ◆ 采用优质不锈钢，四角半圆弧形过度，隔板可自由拆卸，便于箱内的清洁工作。
- ◆ 采用最新P.I.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。
- ◆ 使用高温环境下能连续工作的风扇搭配合适的风道，温度均匀性好。
- ◆ 采用新型的耐高温密封条，能长期高温运行，不易老化，寿命长。
- ◆ 高温干燥箱使用进口温度控制器，温度控制精确度高，性能稳定。
- ◆ 独立限温报警系统，超过限制温度，即自动中断，确保安全（选配）。
- ◆ RS485接口可连接记录仪和计算机，记录温度的变化状况（选配）。
- ◆ 箱体侧面开直径50mm测试孔，便于实验操作与测量温度（选配）。
- ◆ 更多高温干燥箱非标需求，请联系三清仪器客服。

型号	BPG-9030AH	BPG-9050AH	BPG-9100AH	BPG-9200AH
电源电压	220V 50HZ			380V 50HZ
控制范围		100~400°C		
温度分辨率		0.1°C		
温度波动率		1°C		
输入功率	2000w	2500w	3000w	4500w
内胆尺寸 (mm)	320x320x300	350x350x400	450x450x450	600x600x600
外形尺寸 (mm)	665x570x540	695x600x640	795x700x690	945x850x840
载物拖架		2 Pcs		
定时范围		1~9999min		

型号	BPG-9030BH	BPG-9050BH	BPG-9100BH	BPG-9200BH
电源电压	220V 50HZ			380V 50HZ
控制范围		100~500°C		
温度分辨率		1°C		
温度波动率		2°C		
输入功率	2500w	3000w	4500w	6000w
内胆尺寸 (mm)	320x320x300	350x350x400	450x450x450	600x600x600
外形尺寸 (mm)	560x520x700	590x550x800	690x750x850	840x900x1000
载物拖架		2 Pcs		
定时范围		1~9999min		

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

订制类行业专用干燥箱
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

企 E NTERPRISE PRODUCT

订制类行业专用干燥箱 洁净烘箱 工业烤箱



可编程洁净多腔体烤箱

根据客户的需求，参照JB/T5520-91干燥箱技术条件生产。

- 1 温度为常温加热到250°C，温度均匀性≤2.5%℃，波动度≤1.0%℃。
- 2 升降温时间：室温≤250°C ≤ 60分钟，满足用户不同的需求。
- 3 洁净等级：Class 100

订制类行业专用干燥箱 洁净烘箱 工业烤箱



光刻胶固化无氧干燥箱 HMDS真空烤箱

用于精密电子元器件，光刻胶固化，电子陶瓷材料无尘烘干等特殊工艺要求，主要特点如下：

- ◆ 选用全陶瓷纤维保温，具有升温快，节能等特点。
- ◆ 独特设计的送风和排风系统，确保干燥箱内温度均匀性。
- ◆ 送风口配置玻璃纤维过滤器，保证干燥箱内的洁净要求。

订制类行业专用真空干燥箱



真空干燥箱 真空度订制 工作室订制 真空脱泡机

提供真空度程控控制器，客户根据自己的实际需求，在屏幕上设置需求的真空度及真空时间，可实现18段真空值及真空时间。最小真空度可达10Pa。

行业专用脱泡箱，用于产品生产过程中的脱泡，脱水，硬化及洗净后的干燥及真空环境下的热处理。



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT



千级 / 万级无尘氮气烘箱

应用于电子业（硅橡胶、喷涂、半导体、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT精密陶瓷、石英震荡器）、PCB、PE、电解电容、橡塑料键盘、计算机...等；电机、通讯、五金、化工、运动器材、印刷、制药、鞋业、汽车配件等工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途。

型号 Mode		SKPHH-9030A	SKPHH-9070A	SKPHH-9140A	SKPHH-9240A
洁净度	Class 1000#、Class 10000# Federal Standards 209E				
电源	AC220V 50HZ				
功率	1 1.5 2 2.5				
工作环境温度	5°C~+35°C				
性能	温度范围	+20°C~+250°C			
	温度波动度	±0.5°C			
	温度均匀性	200±3°C 250±4°C			
	升温时间	40分钟以内(温室内+250°C)			
结构	外壳	防锈处理冷轧钢板 (表面喷塑料处理)			
	内胆	SUS304#日制阳极不锈钢			
	隔热材料	玻璃棉			
	加热器	覆盖式电热器			
	进气口	(N2 or press air) Φ 8mm			
	出气口	Φ50mm自动开启排风门			
温度控制系统	调节方式	PID控制方式			
	运转方案	定值运转，程序运转			
	设定范围	0~+250°C			
	设定方式	数字式			
	显示方式	LED数字显示			
	传感元件	K型热电偶			
	安全保护	输入断线检测功能 上限温度过热报警功能 蜂鸣器报警功能 自动温度过热防止功能 自行诊断功能			
定时功能		0.1~999.9H			
安全保护装置		电源漏电短路器 电机温度保护开关 温度保险丝 独立温度过升防止装置			
隔板承受能力 (KG)		30			
内容积		30	70	140	240
重量约		50	70	80	90
内部尺寸		340x320x320	400x350x500	450x550x550	500x600x750
外部尺寸		530x500x700	600x530x900	650x730x950	700x780x1150
装	搁板	2块			
	使用说明书	1册			
选购品		可程控温控器 记录器 六点温度显示器 三色指示灯			

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

百 级 洁 净 烘 箱
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查看更多

企 业 产 品



百级洁净烘箱

本设备适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产研究部门。也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温实验。

型 号 Mode	SKCOL-2	SKCOL-3	SKCOL-4	SKCOL-5
洁 净 度	Class 100 # Federal Standards 209E			
电 源	AC380V 3Φ 4W 50HZ			
功 率	7.5	10.5	11	17
工作环境温度	5°C~+35°C			
性 能	温度范围	+60°C~+300°C		
	温度波动度	±0.5°C		
	温度均匀性	200±3°C 300±4°C		
	升温时间	40分钟以内(温室~+300°C)		
结 构	外 壳	防锈处理冷轧钢板 (表面喷塑料处理)		
	内 胆	SUS304#日制阳极不锈钢		
	隔 热 材 料	玻璃棉		
	加 热 器	覆套式电热器		
	进 气 口	(N2 to Clean air) Φ 6mm		
	出 气 口	Φ 5mm自动开启排风门		
温 度 控 制 系 统	调 节 方 式	PID控制方式		
	运 转 方 式	定值运转,程序运转		
	设 定 范 围	0~+300°C		
	设 定 方 式	数字式		
	显 示 方 式	LED数字显示		
	传 感 元 件	K型热电偶		
	安 全 保 护	输入断线检测功能 上限温度过热报警功能 蜂鸣器报警功能 自动温度过热防止功能 自行诊断功能		
定 时 功 能		0.1~999.9H		
安 全 保 护 装 置		电机温度保护开关 温度保险丝 独立温度过升防止装置		
搁 板 承 重 能 力 (kg)				
内 容 积		180	270	480
重 量 约		260	320	450
内 部 尺 寸		600x600x500	600x900x500	800x1000x600
外 部 尺 寸		950x1510x1240	950x1810x1240	1290x1790x955
附 件	搁 板	2块		
	使 用 说 明 书	1册		
选 购 品		可程式温控器 记录器 六点温度显示器 三色指示灯		



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT



高低温（交变）试验箱 试验机

产品介绍

高低温试验箱由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体由A3钢板经过加强设计而成，表面静电喷塑处理，美观大方，内胆由进口SUS304不锈钢板制作。使用精制硅橡胶密封圈，在高温、低温下不存在老化及硬化现象。采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。高低温试验箱独立的加热与制冷系统使设备更有效的加热升温、降温。采用强风循环系统，可使箱体内温度分布均匀。

产品型号	工作室尺寸 W*D*H (mm)	外形尺寸 W*D*H (mm)	交变范围
GDW (J) -50	400×350×400	820×710×1400	-40℃～+150℃交变范围： -30℃～+80℃ -60℃～+150℃交变范围： -50℃～+80℃
GDW (J) -100	500×450×500	920×850×1500	
GDW (J) -150	500×500×600	920×850×1670	
GDW (J) -250	600×520×800	1020×870×1870	
GDW (J) -500	800×700×900	1220×1100×2040	
GDW (J) -800	800×1000×1000	1280×1480×2030	
GDW (J) -1000	1000×1000×1000	1420×1390×2200	
技术参数	温度范围 波动度/均匀度 升温和速率 降温速率	-20℃～150℃、-40℃～150℃、-60℃～150℃、-80℃～150℃ $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\leq 2^\circ\text{C}$ 1.0°C/min ~ 3.0°C/min (平均速率, 非线性) 0.7°C/min ~ 1.0°C/min (平均速率, 非线性)	
箱体材料	外箱材料 内箱材料 保温材料 箱门密封	A3钢板静电喷塑 / SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 进口SUS304不锈钢板 超细玻璃纤维保温棉 / 硬质聚胺脂发泡 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条	
冷热交换系统	控制器 温度传感器 循环系统 加热方式 制冷方式 冷却器 压缩机	进口品牌温湿度控制器 / 可编程触摸屏控制器 铂金电阻PT100Ω/MV 耐温低噪音型电机，加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 镍铬合金电加热式加热器 单元制冷方式 / 双元(复)制冷方式 (风冷) 著名品牌多级膜片式蒸发器 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组	
定时功能	0.1 ~ 99.99 (S M H)		
安保装置	电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护		
标准配置	玻璃观察窗: 220×180 (mm) 照明灯 测试孔 样品架 脚轮		

备注

1. 冷却器采用著名品牌多级膜片式蒸发器。
2. 压缩机 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组。
3. 定时功能: 0.1 ~ 99.99 (S M H)。
4. 安保装置有电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护。



扫一扫
查看更多

ENTERPRISE PRODUCT

高低温(交变)湿热试验箱



产品介绍

高低温(交变)湿热试验箱由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体由A3钢板经过加强设计而成，表面静电喷塑处理，美观大方，内胆由进口SUS304不锈钢板制作。使用精制硅橡胶密封圈，在高温、低温下不存在老化及硬化现象。采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。高低温(交变)湿热试验箱独立的加热与制冷系统使设备更有效的加热升温、降温。采用强风循环系统，可使箱体内温度分布均匀。

产品型号	工作室尺寸 W*D*H (mm)	外形尺寸 W*D*H (mm)	交变范围
GDS (JS)-50	400×350×400	820×860×1400	-40°C~+150°C交变范围：
GDS (JS)-100	500×450×500	920×960×1500	-30°C~+80°C
GDS (JS)-150	500×500×600	920×1050×1670	-60°C~+150°C交变范围：
GDS (JS)-250	600×520×800	1020×1050×1870	-50°C~+80°C
GDS (JS)-500	800×700×900	1220×1230×2040	湿度范围：30%RH ~ 98%RH
GDS (JS)-800	800×1000×1000	1280×1500×2030	
GDS (JS)-1000	1000×1000×1000	1420×1530×2200	
技术参数	温度范围 -20°C ~ 150°C, -40°C ~ 150°C, -60°C ~ 150°C, -80°C ~ 150°C		
参数	湿度/温度偏差 +2%RH -3%RH/±2°C		
波动度/均匀度	≤±0.5°C / ≤2°C		
升温和速率	1.0°C/min ~ 3.0°C/min (平均速率, 非线性)		
降温速率	0.7°C/min ~ 1.0°C/min (平均速率, 非线性)		
箱体材料	外箱材料 A3钢板静电喷塑 / SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理		
材料	内箱材料 进口 SUS304 不锈钢板		
保温材料	保温材料 超细玻璃纤维保温棉 / 硬质聚胺脂发泡		
箱门密封	箱门密封 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条		
冷热交换系统	控制器 进口品牌温湿度控制器 / 可编程触摸屏控制器		
供水方式	供水方式 采用电子液位控制器自动控制、且可回收余水、带缺水报警		
加湿方式	加湿方式 外置隔离式. 全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式		
除湿方式	除湿方式 采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式		
制冷方式	制冷方式 单元制冷方式 / 双元(复叠)制冷方式 (风冷)		
冷却器	冷却器 著名品牌多级膜片式蒸发器		
压缩机	压缩机 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组		
安保装置	安保装置 漏电、定时、超温、缺水保护、快速保险丝、压缩机过压保护		
标准配置	标准配置 玻璃观察窗: 220×180 (mm) 照明灯 测试孔 样品架 脚轮		

备注

- 冷却器采用著名品牌多级膜片式蒸发器。
- 压缩机 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组。
- 定时功能：0.1 ~ 99.99 (S M H)。
- 安保装置有电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护。



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT



恒温恒湿试验箱

产品特点

恒温恒湿试验箱由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。恒温恒湿试验箱箱体由A3钢板经过加强设计而成，表面静电喷塑处理，美观大方，内胆由进口SUS304不锈钢板制作。使用精制硅橡胶密封圈，在高温、低温下不存在老化及硬化现象。采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。恒温恒湿试验箱独立的加热与制冷系统使设备更有效的加热升温、降温。采用强风循环系统，可使箱体内温度分布均匀。

产品型号	工作室尺寸 W*D*H (mm)	外形尺寸 W*D*H (mm)	功率/电压
SH-50	400×350×400	820×860×1400	220V / 2.5KW
SH-100	500×450×500	920×960×1500	220V / 3.0KW
SH-150	500×500×600	920×1050×1670	220V / 3.5KW
SH-250	600×520×800	1020×1050×1870	380V / 4.5KW
SH-500	800×700×900	1220×1230×2040	380V / 5.0KW
SH-800	800×1000×1000	1280×1500×2030	380V / 5.5KW
SH-1000	1000×1000×1000	1420×1530×2200	380V / 7.0KW
SH-1500	1500×1000×1000	1980×1530×2200	380V / 8.0KW
技术参数	温度范围	0°C~+100°C (或+150°C)	
	湿度范围	30%RH ~ 98%RH	
	湿度偏差	+2%RH-3%RH	
	温度偏差	±2°C	
参数	波动度/均匀度	≤±0.5°C / ≤2°C	
	升温速率	1.0°C/min ~ 3.0°C/min	
	降温速率	0.7°C/min ~ 1.0°C/min	
箱体材料	外箱材料	A3钢板静电喷塑 / SUS304不锈钢雾面线条发纹处理	
	内箱材料	进口SUS304不锈钢板	
材料	保温材料	超细玻璃纤维保温棉 / 硬质聚胺脂发泡	
	箱门密封	双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条	
冷热交换系统	控制仪	进口品牌温湿度控制器/可编程触摸屏控制器 精度范围：温度±0.1°C 显示精度：温度±0.1°C	
	温度传感器	铂金电阻PT100Ω/MV	
	循环系统	耐温低噪音型电机，加长轴、不锈钢多叶式离心风叶	
	供水方式	采用电子液位控制器自动控制，且可回收余水，带缺水报警	
	加湿方式	外置隔离式，全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式	
	除湿方式	采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式	
	加热方式	镍铬合金电加热式加热器	
	制冷方式	单元制冷方式 / 双元(复叠)制冷方式(风冷)	
	冷却器	著名品牌多级膜片式蒸发器	
	压缩机	著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组	
安保装置	漏电、超温、缺水保护、快速保险丝、压缩机过压保护		
标准配置	玻璃观察窗：220×180 (mm) 照明灯 测试孔 样品架 脚轮		
使用环境温度	15°C~+30°C ≤85%RH		

备注

1. 冷却器采用著名品牌多级膜片式蒸发器。
2. 压缩机 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组。
3. 安保装置有电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护。

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

培养箱(生化/霉菌/恒温恒湿)

支持非标订制 按需订制



扫一扫
查看更多

企 E NTERPRISE PRODUCT



培养箱(生化/霉菌/恒温恒湿/电热恒温/光照)

产品特点

- ◆ 外壳采用1.2mm优质冷轧钢板加强制造，牢固耐用。表面静电喷塑，耐腐蚀，耐刮擦。
- ◆ 内胆采用优质SUS304不锈钢材料加强设计，柜体牢固，经久耐用，隔板承重性高。
- ◆ 半圆形四角设计使风向流畅及清洁更方便。
- ◆ 采用双层门结构，隔热性好，便于观察箱内情况。使用磁性密封条，密封性好。
- ◆ 温控系统采用微电脑技术，控温精度高，具有温度，时间调节功能，触摸式按键。
- ◆ 配置先进的模糊PID智能温度控制器，波动小，控温精确，带定时功能。
- ◆ 国际品牌压缩机，可保证设备长时间运行，环保型制冷剂，高效节能。

生化培养箱 标准配置照明灯 型号尾数D表示低温型、温度范围：-8°C - 60°C						
产品型号	工作室尺寸 (MM)	外形尺寸 (MM)	功率 (W)	电源电压	温控参数	隔板
SPX-70	W400*D350*H510	W530*D640*H1055	400	220V 50HZ	温度范围：4°C - 60°C	2
SPX-150	W500*D370*H800	W645*D590*H1350	500		温度分辨率：0.1°C	3
SPX-250	W550*D445*H1100	W695*D665*D1650	680		恒温波动度：±1°C	3
SPX-150D低温型	W500*D370*H800	W645*D590*H1350	650			3
霉菌培养箱 标准配置紫外线灯						
MJX-70	W400*D350*H510	W530*D640*H1055	400	220V 50HZ	温度范围：4°C - 60°C	2
MJX-150	W500*D370*H800	W645*D590*H1350	500		温度分辨率：0.1°C	3
MJX-250	W550*D445*H1100	W695*D665*D1650	680		恒温波动度：±1°C	3
恒温恒湿培养箱 型号尾数D表示低温型，温度范围：-8°C - 60°C						
HSX-70	W400*D350*H350	W530*D640*H1055	500	220V 50HZ	温度范围：4°C - 60°C 湿度范围：55%RH - 90%RH 波动度：±1°C 均匀度：±2°C 湿度波动度：±3%RH - ±5%RH	2
HSX-150	W500*D370*H800	W645*D590*H1350	680			2
HSX-250	W550*D445*H1100	W695*D665*D1650	680			3
HSX-150D低温型	W500*D370*H800	W645*D590*H1350	850			3
电热恒温培养箱 / 隔水式培养箱						
50升	W350*D350*H410	W495*D530*H715	250/460	220V 50HZ	温度范围：室温 - 65°C	2
80升	W400*D400*H500	W545*D580*H805	360/660		温度分辨率：0.1°C	
160升	W500*D500*H650	W645*D680*H955	560/860		恒温波动度：±0.5°C	
270升	W600*D600*H750	W745*D780*H1055	760/1360			

备注

1. 生化培养箱默认配置照明灯，可换紫外线灯。
2. 霉菌培养箱默认配置紫外线灯。
3. 恒温恒湿培养箱配置智能雾化加湿器及大容量水箱。



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT

电子防潮箱 防潮柜



产品特点

- ◆ 箱体由1.2mm优质冷轧钢板，加强设计而成，结构牢固，寿命长。
- ◆ 表面经过除油、酸洗、磷化、静电喷塑而成，耐腐蚀，耐刮擦。
- ◆ 门窗镶嵌高强度钢化玻璃，搭配平面加压把手设计，气密性优越。
- ◆ 高强度载重自由移动式层板，存放物料更方便，空间利用率更高。
- ◆ 可选采用永久性静电烤漆，符合防静电标准，保护元器件的安全。
- ◆ 温湿度双区独立显示。参数具有记忆功能，断电后无需重新设定。
- ◆ 温湿度一体传感器采用原装进口品牌HoneyWell，数据精准可靠。
- ◆ 底部安装导静电万向脚轮，方便移动和定位。箱体及层板承重性好。

三清仪器防潮箱除湿机芯采用高温阻燃材料外壳，杜绝安全隐患。内置进口吸湿材料，再生循环使用。采用自动程控感应系统，当箱内的湿度达到设定值时，系统会自动停止工作；当箱内的湿度超过设定值时，系统会自动降低箱体内的湿度。内置微循环系统，箱体内的湿度更加均匀，更好的保护物料。断电后仍可继续物理吸湿，确保箱内24小时内湿度上升不超过10%RH。防潮箱除湿机芯工作时无明水，无噪音。

三清仪器防潮箱符合J-STD-033B规范对湿敏元件(MSD)储存的要求。可选SUS304不锈钢材质。

产品容积	内径尺寸 (MM)	外形尺寸 (MM)	隔板数量	开门方式
98升	W446*D372*H598	W448*D400*H688	1	单开门
160升	W446*D422*H848	W448*D450*H1010	3	单开门
240升	W596*D372*H1148	W598*D400*H1310	3	上下双开门
320升	W898*D422*H848	W900*D450*H1010	3	左右双开门
435升	W898*D572*H848	W900*D600*H1010	3	左右双开门
540升	W596*D682*H1298	W598*D710*H1465	3	上下双开门
718升	W596*D682*H1723	W598*D710*H1910	5	上中下三开门
870升	W898*D572*H1698	W900*D600*H1890	5	四开门
1436升	W1198*D682*H1723	W1200*D710*H1910	5	四开门/六开门
温度范围	A系列：20% - 60%RH 可调节/B系列：10%-20%RH 可调节 C系列：1% - 10%RH 全自动/T系列：1%-5%RH 全自动			显示精度 温度：±1°C 湿度：±3%RH

防潮箱温湿度管理记录功能，实时监控防潮箱内温湿度变化，使用相关软件后，可支持在电脑界面实时显示温湿度曲线图及保存打印历史记录数据。（选购）

备注

1. 支持不锈钢材质订制，洁净等级更高。
2. 可搭配氮气(N2)或者压缩空气(CA)使用，实现防潮箱快速除湿。
3. 照明、非标尺寸、抽屉式、插槽式等要求请联系三清仪器客服。
4. 更多的湿度范围及除湿时间要求请联系三清仪器客服。

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

智能氮气柜 节约氮气柜
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

ENTERPRISE PRODUCT

智能氮气柜 节约氮气柜

智能氮气柜是通过向箱体内充入高纯度氮气来有效的降低气密性良好的箱体内的湿度和氧含量，且可以精准的控制和稳定在预设的湿度范围内，从而达到防氧化，防潮，防霉变，防锈等目的。三清仪器智能氮气柜高效除湿，防氧化，绿色低能耗，内置程控感应系统根据箱体内的湿度自动供气和切断氮气，节约能源，延长使用寿命。



产品特点

- ◆ 箱体由1.2mm优质冷轧钢板，加强设计而成，结构牢固，寿命长。
- ◆ 表面经过除油，酸洗，磷化，静电喷塑而成，耐腐蚀，耐刮擦。
- ◆ 门窗镶嵌高强度钢化玻璃，搭配平面加压把手设计，气密性优越。
- ◆ 高强度载重自由移动式层板，存放物料更方便，空间利用率更高。
- ◆ 可选采用永久性静电烤漆，符合防静电标准，保护元器件的安全。
- ◆ 温湿度双区独立显示。参数具有记忆功能，断电后无需重新设定。
- ◆ 温湿度一体传感器采用原装进口品牌HoneyWell，数据精准可靠。
- ◆ 底部安装导静电万向脚轮，方便移动和定位，箱体及层板承重性好。

三清仪器智能氮气柜控氮机芯使用金属外壳，表面静电喷塑。内置进口配件，性能稳定可靠。采用自动程控感应系统，当箱内的湿度达到设定值时，系统会自动切断氮气供应；当箱内的湿度超过设定值时，系统会自动打开氮气供应来降低箱体内的湿度和氧含量。多点均匀式供气系统，防止气体过冲给存放的物料带来破坏性的影响及确保箱体内的氮气均匀性，防止受潮氧化，更好的保护存放的物料。

三清仪器氮气柜符合J-STD-033B规范对湿敏元件(MSD)储存的要求。可选SUS304不锈钢材质。

产品容积	内径尺寸（MM）	外形尺寸（MM）	隔板数量	开门方式
98升	W446*D372*H598	W448*D400*H688	1	单开门
160升	W446*D422*H848	W448*D450*H1010	3	单开门
240升	W596*D372*H1148	W598*D400*H1310	3	上下双开门
320升	W898*D422*H848	W900*D450*H1010	3	左右双开门
435升	W898*D572*H848	W900*D600*H1010	3	左右双开门
540升	W596*D682*H1298	W598*D710*H1465	3	上下双开门
718升	W596*D682*H1723	W598*D710*H1910	5	上中下三开门
870升	W898*D572*H1698	W900*D600*H1890	5	四开门
1436升	W1198*D682*H1723	W1200*D710*H1910	5	四开门/六开门
湿度范围	1% - 60%RH 可调节	显示精度	温度：±1°C 湿度：±3%RH	
进气压力	0.2 - 0.4 MPa	节氮模组	多点供气系统，SMC节氮气模组	

温湿度管理记录功能，实时监控氮气柜内温湿度变化，使用相关软件后，可支持在电脑界面实时显示温湿度曲线图及保存打印历史记录数据。（选购）

备注

- 1.支持不锈钢材质订制，洁净等级更高。
- 2.可搭配防潮箱除湿系统使用，实现氮气柜更进一步节约氮气。
- 3.照明、非标尺寸、抽屉式、插槽式等要求请联系三清仪器客服。



E NTERPRISE PRODUCT

工业安全柜 防爆安全柜

三清仪器工业安全柜防爆柜完全依照OSHA标准（美国职业安全健康管理局）生产，符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求，用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品，同时通过了第三方欧盟CE权威认证。专业用于存储各类生产性或生活性的化学危险品，有组织，有条理地分开各类危险品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全。



产品特点

- ◆ 整体采用优质1.2mm冷轧钢板，加强设计，静电喷塑而成，柜体牢固耐用。
- ◆ 柜体内外都经过静电喷塑，防腐蚀，防锈。防火通风口，位于柜身的两侧。
- ◆ 采用双层防火钢板构造，可选加防火材料，防爆防火性能好，安全存放化学品。
- ◆ 配置有活动式镀锌层板，防液漏，防腐蚀，最大可承托400lbs的钢制安全罐。
- ◆ 柜身底部有50mm高的防漏液槽，最大可能的防止化学液体的外溢及方便清洁。
- ◆ 安全柜配置三点联动式门锁，配有双钥匙；可选配挂锁，实现双人双锁管理。
- ◆ 按照OSHA规范，安全柜内置的地面接地导线，能抑制静电产生而导致的隐患。
- ◆ 产品通过欧盟CE认证，RoHS认证，通过防爆及耐火测试并持有相关证书。

备注

1. 可选装液晶屏密码锁。双人双锁管理，安全管控危险化学品。
2. 安全柜内部可选装8mm瓷白色聚丙烯PP内胆和PP托盘。防酸防碱防腐蚀，内部易清理。
3. 可选装35mm厚度的岩棉，防火隔热性能更加优越。
岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，(密度150kg/m³, 厚度: 35mm)。
4. 油桶防爆安全柜箱体底部安装镀锌滚轴，方便搬运。

产品型号	容积	外形尺寸 (MM)	产品重量 (Kg)	隔板	配置
SKS-04	4加仑/15升	W430*D430*H560	34	1	手动单开门
SKS-12	12加仑/45升	W590*D460*H890	60	1	手动单开门
SKS-22	22加仑/83升	W600*D460*H1650	90	3	手动单开门
SKS-30	30加仑/114升	W1090*D460*H1120	100	1	手动双开门
SKS-45	45加仑/170升	W1090*D460*H1650	138	2	手动双开门
SKS-60	60加仑/227升	W860*D860*H1650	165	2	手动双开门
SKS-90	90加仑/340升	W1090*D860*H1650	190	2	手动双开门
SKS-110	110加仑/410升	W1500*D860*H1650	270	2	手动双开门
颜色分类	根据存放的不同物品，选择不同的颜色。可选黄色，红色，蓝色。或其它客户指定颜色。				
安全管控	三点联动一体式柜锁，暗扣式挂锁（需另配）。双人双锁安全管控，可选配高档液晶屏电子密码锁				

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

工业安全柜 防爆安全柜
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

ENTERPRISE PRODUCT

工业安全柜 防爆安全柜 颜色分类指示



可燃液体存储柜



易燃液体存储柜



弱酸弱碱存储柜

红色防爆安全柜，代表专业储存易燃液体化学品。如：酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、苯、天那水、抹机水等。

黄色防爆安全柜，代表专业储存易燃液体化学品。如：酒精、胶水、汽油、煤油、原油、乙醇、苯、天那水、抹机水等。

蓝色防爆安全柜，代表专业储存腐蚀性液体化学品。如：硫酸、氯氧化钠、漂白水、洗板水、甲醛、烷基硫酸等腐蚀性的化学品等。



三点联动锁 双锁管理



漏液槽



选装液晶密码锁


可移动镀锌层板



外通风孔 风量可调



内通风孔 带灭焰功能

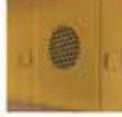

气瓶柜



产品特点

钢制气瓶柜主要用来储存气体钢瓶，其目的是保护气体钢瓶不受柜体外面火灾的影响以及保护周围物品免受柜体内部火灾的金属容器。全钢工艺制作，加强设计，承重性好，组合灵活，便于安装运输，外形设计美观大方。气瓶柜有单瓶和双瓶、三瓶三款,可选择自动报警、排气等功能。
(选装气体检测及报警)

单瓶气瓶柜	600*450*1800 mm	黄色 / 灰色 (环氧树脂烤漆)	可存储1瓶气瓶	优质冷轧钢	选配报警器
双瓶气瓶柜	900*450*1800 mm	黄色 / 灰色 (环氧树脂烤漆)	可存储2瓶气瓶	优质冷轧钢	选配报警器
三瓶气瓶柜	1200*450*1800 mm	黄色 / 灰色 (环氧树脂烤漆)	可存储3瓶气瓶	优质冷轧钢	选配报警器



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT

易制毒化学品存储柜

毒害品存储柜用于规范储存毒品、毒害品、剧毒品、贵重药品、等特种有毒品。有组织，有条理的分开各类毒害品，减少事故的发生，确保安全。毒害品存储柜符合OSHA29CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和NFPA CODEE30（美国国家消防协会）的相关标准要求，同时通过了第三方欧盟CE权威认证。



产品特点

- ◆ 整体采用优质1.2mm冷轧钢板，加强设计，静电喷塑而成，柜体牢固耐用。
- ◆ 柜体内外都经过静电喷塑，防腐蚀，防锈。防火通风口，位于柜身的两侧。
- ◆ 采用双层防火钢板构造，可选加防火材料，防爆防火性能好，安全存放化学品。
- ◆ 配置有活动式镀锌层板，防泄漏，防腐蚀，最大可承托400lbs的钢制安全罐。
- ◆ 柜身底部有50mm高的防漏液槽，最大可能的防止化学液体的外溢及方便清洁。
- ◆ 安全柜配置三点联动式门锁，配有双钥匙；可选配挂锁，实现双人双锁管理。
- ◆ 按照OSHA规范，安全柜内置的地面接地导线，能抑制静电产生而导致的隐患。
- ◆ 产品通过欧盟CE认证，RoHS认证，通过防爆及耐火测试并持有相关证书。

备注

- 1.易制毒化学品存储柜颜色可做灰色或其他指定颜色。
- 2.可选装液晶屏密码锁。双人双锁管理，安全管控危险化学品。
- 3.毒害品安全柜内部可选装8mm瓷白色聚丙烯PP内胆和PP托盘。防酸防碱防腐蚀，内部易清理。
- 4.可选装35mm厚度的岩棉，防火隔热性能更加优越。
岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150kg/m³，厚度：35mm）。
- 5.可订制温湿度智能监测系统毒害品存储柜。

产品型号	容积	外形尺寸 (MM)	产品重量	隔板	配置
SKP-04	4加仑/15升	W430*D430*H560	34	1	手动单开门
SKP-12	12加仑 / 45升	W590*D460*H890	60	1	手动单开门
SKP-22	22加仑 / 83升	W600*D460*H1650	90	3	手动单开门
SKP-30	30加仑 / 114升	W1090*D460*H1120	100	1	手动双开门
SKP-45	45加仑 / 170升	W1090*D460*H1650	138	2	手动双开门
SKP-60	60加仑 / 227升	W860*D860*H1650	165	2	手动双开门
SKP-90	90加仑 / 340升	W1090*D860*H1650	190	2	手动双开门
SKP-110	110加仑 / 410升	W1500*D860*H1650	270	2	手动双开门
颜色分配	根据存放的不同物品，不同颜色。可选黄色、红色、蓝色。或其他客服指导颜色。				
安全管控	高档液晶屏电子密码锁，三点联动一体式柜锁、暗扣式挂锁（需另配）。双人双锁安全管控				

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

强酸强碱柜 PP柜
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

企 E NTERPRISE PRODUCT

强酸强碱柜 PP柜

强酸强碱柜是专门针对强腐蚀性化学品的存储和防渗漏而设计，专门存放具有强腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、KOH、NaOH等化学品物质）。强酸强碱柜可以规范管理，有条理，分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害风险。



产品特点

- ◆ 柜体采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，耐腐蚀性强。
- ◆ 无缝焊接处理，一体成型，无废料拼凑，结构牢固耐用。
- ◆ 层板采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，整体焊接成型。
- ◆ 层板可随意调节放在合适的位置，自由组合各层空间。
- ◆ 当层板反方向放置时，四周立边可获得一定程度防溢效果。
- ◆ 铰链及把手均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。
- ◆ 调整脚采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可调水平。
- ◆ 双挂锁设计，提供更高的安全保障，层板数量可自由加减。
- ◆ 柜门贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。

备注

- 1.可开百叶窗式通风孔或其他要求，有机玻璃门或者透明PC板门窗。
- 2.可选抽气式过滤装置。
- 3.可加装高端液晶密码锁。

产品型号	容积	外形尺寸 (MM)	层板尺寸 (MM)	隔板	配置
SKA-04	4加仑/15升	W430*D430*H560	W404*D394*H40	1	手动单开门/双锁
SKA-12	12加仑/45升	W590*D460*H890	W564*D424*H40	1	手动单开门/双锁
SKA-28	28加仑/83升	W910*D600*H900	W884*D394*H40	1	手动双开门/双锁
SKA-30	30加仑/114升	W1090*D460*H1120	W1064*D424*H50	1	手动双开门/双锁
SKA-45	45加仑/170升	W1090*D460*H1650	W1064*D424*H50	2	手动双开门/双锁
SKA-60	60加仑/227升	W860*D860*H1650	W834*D824*H50	2	手动双开门/双锁
SKA-90	90加仑/340升	W1090*D860*H1650	W1064*D824*H50	2	手动双开门/双锁
SKA-110	110加仑/410升	W1500*D860*H1650	W1474*D824*H50	2	手动双开门/双锁
隔板特色	隔板正反方向均可放置，当反方向放置时，隔板的四周立边可起到防溢出效果				
配件特点	门把手和门铰链均为同质PP材料，一体成型，耐腐蚀性能强。常用于各腐蚀性化学品的储存				

器皿柜 药品柜

型号	外部尺寸 (mm)	层板	视窗	材质
SKY-1	W900*D450*H1800	3块 可调节	3 mm	8mm 聚丙烯板材
SKY-2	W1200*D450*H1800	3块 可调节	3 mm	8mm 聚丙烯板材
SKY-3	W1500*D450*H1800	3块 可调节	3 mm	8mm 聚丙烯板材

备注：如您对产品有其他需求，请联系在线客服或拨打400-990-3717客服电话



扫一扫
查看更多

E NTERPRISE PRODUCT

温湿度记录管理系统



产品特点

- ◆ 外型尺寸：W340 * H360 * D55 毫米。
- ◆ 4英寸大屏超高亮数码双区显示，超低功耗设计。
- ◆ 温度及湿度可自由设置上限和下限值，溢出范围及报警。
- ◆ 设置值有记忆功能，断电后无需重新设置。
- ◆ 报警方式采用高分贝蜂鸣器 (>70dB) 及内置闪亮器。
- ◆ 温度显示范围：-9.9 °C ~ +70 °C 误差：±1.0 °C。
- ◆ 湿度范围：0.1% RH ~ 99.9% RH 误差：±3.0% RH。

温湿度记录功能：温湿度记录显示器单机版能保存记录近200小时的温湿度数据，配有相关软件后可支持从电脑实时监控或保存打印历史记录数据，电脑接口采用USB数据连线。网络版数据无限储存，局域网内最大支持253台。

防潮箱、氮气柜温湿度记录功能，单机版数据可保存记录近800小时数据，配有相关软件后可支持从电脑实时监控或保存打印历史记录数据，电脑接口采用USB数据连线。网络版数据无限储存，局域网内最大支持253台。

温湿度设备局域网组网示意图



温湿度设备包括防潮箱，氮气柜，温湿度记录显示器通过TCP/IP协议组成局域网，搭配专业温湿度记录软件，实现工厂车间温湿度智能管理，可在电脑终端设置，管理，输出温湿度曲线图，查验存放物料环境的异常情况，报警提示等功能。

三清仪器实验室及工业行业仪器设备专业供应商
全国客服热线：400-990-3717 0512-52994109

智能储物柜手机柜更衣柜
支持非标订制 按需订制



扫一扫
查找更多

E NTERPRISE PRODUCT

智能储物柜 手机柜 更衣柜

智能储物柜，手机柜，更衣柜是为了规范管理车间工作环境和工作安全，用来存放员工或来宾临时物品的管理工具。储物柜直接使用员工卡（需绑定）或指纹，可直接开启箱门存放衣物、手机或其他物品，员工卡（指纹）和箱门号一一对应，防止物品错拿或丢失。方便管理，提高管理效率。



产品特点

- ◆ 柜体使用1.2mm钢板整体加强设计，牢固耐用，使用寿命长。
- ◆ 表面经过除油，酸洗，磷化等处理，静电喷塑而成，耐腐蚀。
- ◆ 控制芯片使用ARM芯片，处理速度和数据传输速度高且稳定。
- ◆ 电控锁经过数万次的测试，不卡锁。防撬防盗，防水防锈。
- ◆ 储物柜通过员工卡(指纹)开启箱门，存取物品，方便实用。
- ◆ 可授权管理员，管理员卡可进行员工卡信息的删除与增加。
- ◆ 管理员卡可以实现应急开门、锁门、查询等后台管理操作。
- ◆ 开箱记录时间可查询，可加装UPS电源，防止停电带来意外。

更衣柜标准产品尺寸 支持订制

型号	门数	外部尺寸 (mm)	箱格尺寸 (mm)	控制方式	开门方式
SKL-4	4门	W830*D430*H1800	W270*D410*H840	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKL-6	6门	W1250*D430*H1800	W270*D410*H840	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKL-8	8门	W1670*D430*H1800	W270*D410*H840	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKL-12	12门	W2300*D430*H1800	W270*D410*H840	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹

备注：如您对产品有其他需求，请联系在线客服或拨打400-990-3717客服电话

储物柜标准产品尺寸 支持定制

型号	门数	外部尺寸 (mm)	箱格尺寸 (mm)	控制方式	开门方式
SKC-12	12门	W830*D430*H1800	W270*D410*H280	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKC-18	18门	W1250*D430*H1800	W270*D410*H280	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKC-24	24门	W1670*D430*H1800	W270*D410*H280	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹
SKC-36	36门	W2300*D430*H1800	W270*D410*H280	单机 / 联网	员工IC / ID卡 / 指纹

备注：如您对产品有其他需求，请联系在线客服或拨打400-990-3717客服电话

手机柜标准产品尺寸：W1200*D300*H1792 MM 单门尺寸：W184*D280*H154 MM



使用员工卡开启箱门



手机管理柜



更衣柜分层，顶部带挂杆

备注

1.组网模式可实现更多便捷的管理功能，产品颜色和尺寸均可订制。

尊敬的客户：

非常感谢您一直以来对三清仪器(SOOKING)的关注和支持，在此为了更好的为您提供产品及服务，如您有任何疑问或建议，请通过我们的服务中心来和我们取得联系，我们尽可能的为您提供更完善更快捷的服务，再次感谢您的监督与支持。

客服电话:400-990-3717

—— 苏州三清仪器有限公司



苏州三清仪器有限公司

SUZHOU SOOKING INSTRUMENT CO., LTD.



三清仪器 环境试验事业部

销售专员：林 欣

服务热线：400-990-3717 / 0512-52994109

移动电话：180-5180-0051

销售邮箱：soodking@qq.com



三清仪器 安全存储事业部

销售专员：汪青云

服务热线：400-990-3717 / 0512-52994109

移动电话：159-9595-7241

销售邮箱：soodking@vip.qq.com

公司地址：中国 江苏省 苏州市 常熟市 高新技术产业园 珠海路2号